

Dräger



СПУТНИК
МЕДИЦИНА

cmedicine.ru



Plus, который дает вам больше

FABIUS® PLUS

Техника для жизни.

Свяжитесь с нами 8 (800) 700-61-87 / sales@cmedicine.ru

Каждый новый день - это решение НОВЫХ задач



Существует ли экономичное в эксплуатации решение для анестезии высочайшего качества? Настраиваемое в соответствии с нашими потребностями? Простое и надежное?

Посмотрите внимательнее на аппарат Fabius plus

Клиники всего мира постоянно ищут практичные и экономичные решения своих повседневных задач. Если учесть, что сейчас более 30 000 аппаратов семейства Fabius используется в 120 странах по всему миру, то становится ясно, что для многих больниц поиск качества и надежности часто заканчивается приобретением Fabius plus. Инновационная технология вентиляции в сочетании с простотой эксплуатации и технического обслуживания делают Fabius plus естественным выбором для широкого использования.

Fabius plus сочетает в себе бескомпромиссную гибкость и расширенные возможности соединения, которые отличают его от многих других платформ. Он дает вам то, что вам нужно сейчас, и обладает потенциалом, позволяющим вам расти в будущем, благодаря широкому спектру опций, которые позволяют вам расширить свои возможности, когда это потребуется. Fabius plus – это разумное вложение средств.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает все основные режимы вентиляции
- Высококонтрастный монитор с возможностью работы в цвете
- Широкая тележка с повышенной устойчивостью для различных комбинаций размещения мониторов

- Возможность крепления на стене и на потолочной консоли
- Надежная вместительная конструкция с большими ящиками (только вариант с тележкой)
- Интеллектуальные вспомогательные функции помогают максимально увеличить эффективность операционной
- Стандартный интерфейс пользователя компании Dräger для простого и интуитивно понятного управления
- Стандартные рельсы позволяют устанавливать дополнительное оборудование компании Dräger и других производителей
- Адаптер CLIC для использования одноразовых конейнеров Drägersorb Clic





ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основой аппарата Fabius plus является наш мощный и точный поршневой вентилятор E-vent, который не требует использования приводного газа и обеспечивает эффективность вентиляции на уровне требований для интенсивной терапии. Это означает, что Fabius plus может применяться для вентиляции при самых разнообразных условиях и состояниях различной тяжести как для детей, так и для взрослых пациентов. Аппарат поддерживает все основные режимы вентиляции, в том числе с управлением по объему, давлению, вентиляцию с поддержкой давлением (PS) и режим синхронизированной перемежающейся вспомогательной ИВЛ (SIMV/PS). Но это еще не все. Fabius plus обладает также расширенными функциями, такими как отсечение потока свежего газа, которое поддерживает постоянство дыхательного объема независимо от изменения потока свежего газа. Динамическая компенсация комплайенса и резервный принудительный режим вентиляции для режимов PS позволяют осуществлять вентиляцию с большей уверенностью и контролем. Fabius plus может быть оснащен двумя испарителями для летучих анестетиков. Благодаря сочетанию высокоточного вентилятора и его герметичной конструкции системы дыхания Fabius plus хорошо подходит для низкочастотной вентиляции.

Для быстрого оказания помощи в чрезвычайных ситуациях функция быстрого запуска делает возможным проведение вентиляции в ручном режиме, когда устройство выключено, включено или находится в режиме ожидания. Даже в случае прекращения газоснабжения автоматическая вентиляция может быть продолжена.

ВСЕСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ

Fabius plus оснащен встроенным высококонтрастным 16,5 см монитором, отображающим все необходимые параметры вентиляции и кривую давления. Выпускается модель с цветным монитором (опция). Расход газа контролируется с помощью традиционных стеклянных флоуметров.

Если вы использовали рабочую станцию компании Dräger раньше, то вы уже знакомы со стандартным интерфейсом пользователя оборудования компании Dräger, который реализует нашу проверенную концепцию «выбор-регулировка-подтверждение». Это означает, что вы сможете очень быстро начать работу с аппаратом Fabius plus.

УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Аппарат Fabius plus разработан так, чтобы он соответствовал вашему рабочему процессу, а не наоборот. Устойчивая тележка с широкой базой делает установку Fabius plus простой и безопасной. Можно заказать также модель с настенным или потолочным креплением.

В варианте с тележкой предусмотрено три больших ящика, которые обеспечивают достаточно места для хранения дополнительного оборудования и расходных материалов, а большой стол обеспечивает удобную работу с документами. Конструкция внешней компактной системы дыхания (COSY) обеспечивает простую сборку и чистку. Монтаж может быть выполнен на любую сторону в соответствии с компоновкой вашей операционной. Поскольку поршневой вентилятор E-vent не требует приводного газа, для его работы не требуются дорогостоящие газы для медицинского применения.

Fabius Plus совместим с адаптером CLIC для использования одноразовых контейнеров Dräger sorb Clic, это предотвращает контакт кожи


с натронной известью и позволяет заменять даже во время анестезии. Это повышает безопасность персонала и пациентов при замене натронной извести и улучшение рабочих процессов (с.а.г.е. № 2/2007 15)

РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ: НАСТРОЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Поскольку каждая больница обладает своей индивидуальной рабочей средой, Fabius plus был разработан для обеспечения высокой степени гибкости. Воспользуйтесь преимуществом наличия большого пространства для установки дополнительных мониторов или ИТ оборудования. Вы можете выбрать монитор из широкого ассортимента мониторов Dräger Infinity или даже из одобренного Dräger списка сторонних производителей. У вас всегда будет возможность скомпоновать Fabius plus, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные потребности. Если ваши требования в будущем изменятся, Fabius plus может соответственно меняться вместе с вами. Ваш представитель Dräger с удовольствием поможет в выборе опций, которые подходят именно вам.



DR GER FABIUS PLUS

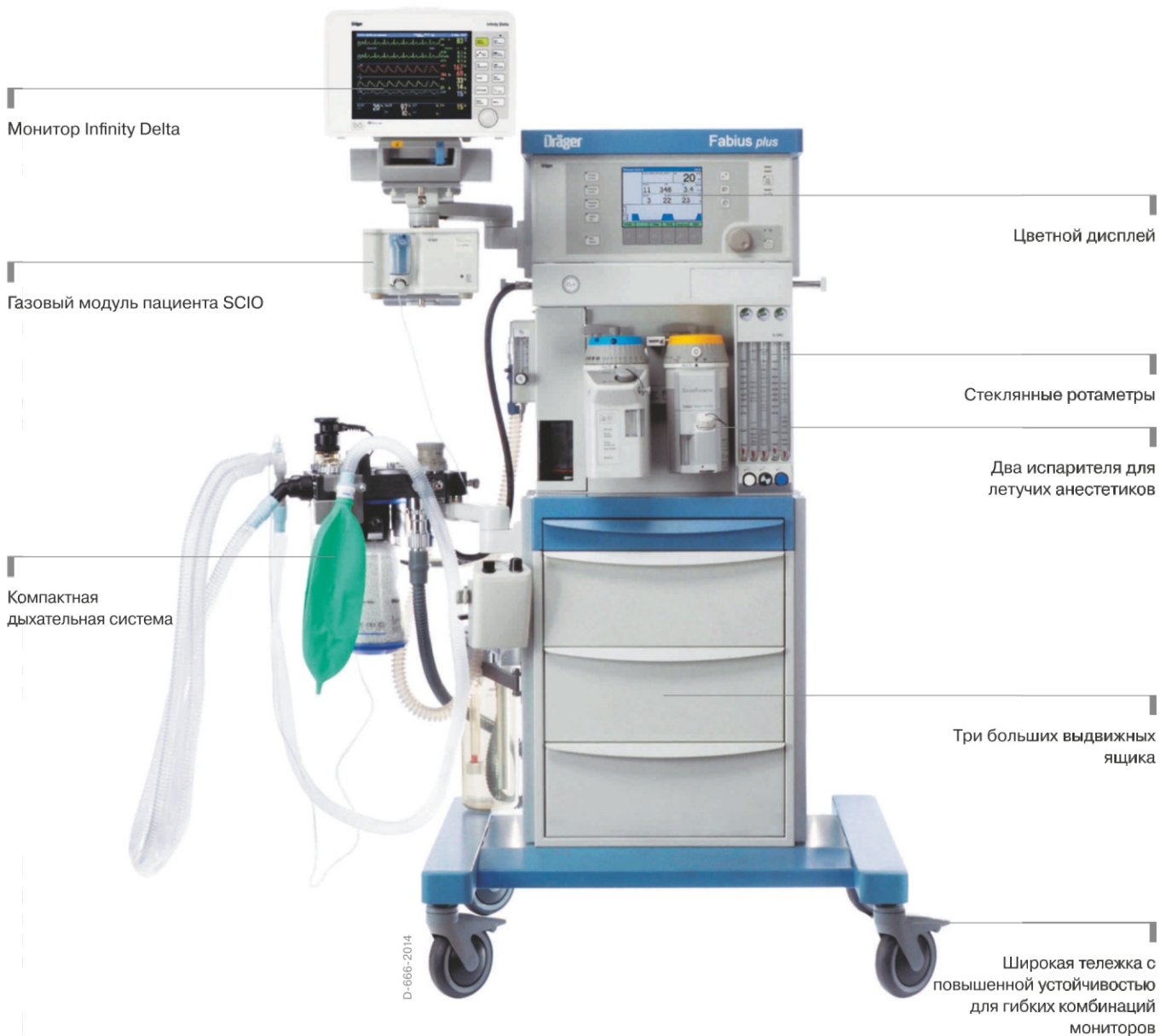

Узнайте у Вашего регионального представителя Dr ger о других изделиях семейства аппаратов Fabius:





Правильно выберите вариант обслуживания: DrägerService предлагает широкий спектр гибких вариантов сервиса, которые вы можете выбирать и комбинировать для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей – от технической поддержки до комплексных контрактов на обслуживание с фиксированным бюджетом. Решения, предлагаемые при дистанционном обслуживании, обеспечивают дополнительные возможности для улучшения бесперебойной работы аппаратов.

Опции и аксессуары

Широкий выбор опций и принадлежностей позволяет создать именно то рабочее место, которое нужно вам:



D-395-2010

Оptionный цветной монитор



MT-1955-2008

Дыхательная система со встроенным нагревателем



D-1132-2009

Мониторы пациента Dräger Infinity и решения для их размещения



MT-24206-2009

Газовый монитор Dräger Vamos для летучих анестетиков; Опции CO₂ и SpO₂



D-354-2010

Вспомогательный расходомер O₂



MT-3876-2008

Складывающийся боковой столик



MT-3890-2008

Медицинский удлинитель



MT-1328-2008

Боковая корзина



D-34361-2009

Штыревое крепление резервных газовых баллонов



MT-6529-2008

Дистанционное обслуживание Dräger



**СПУТНИК
МЕДИЦИНА**

cmedicine.ru

ПРОДАЖА И СЕРВИС МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



УЗИ аппараты

Эндоскопия

Маммография

Рентгены

Реанимационное оборудование

Хирургическое оборудование

Компьютерная томография

Магнитно-резонансная томография

Контакты:

443058, г. Самара ул. Физкультурная 90 

8 (800) 700-61-87 

sales@cmedicine.ru 

cmedicine.ru 